


 **Fluidido[®] Compact**
Blood and Fluid Warming
輸液輸血加温システム

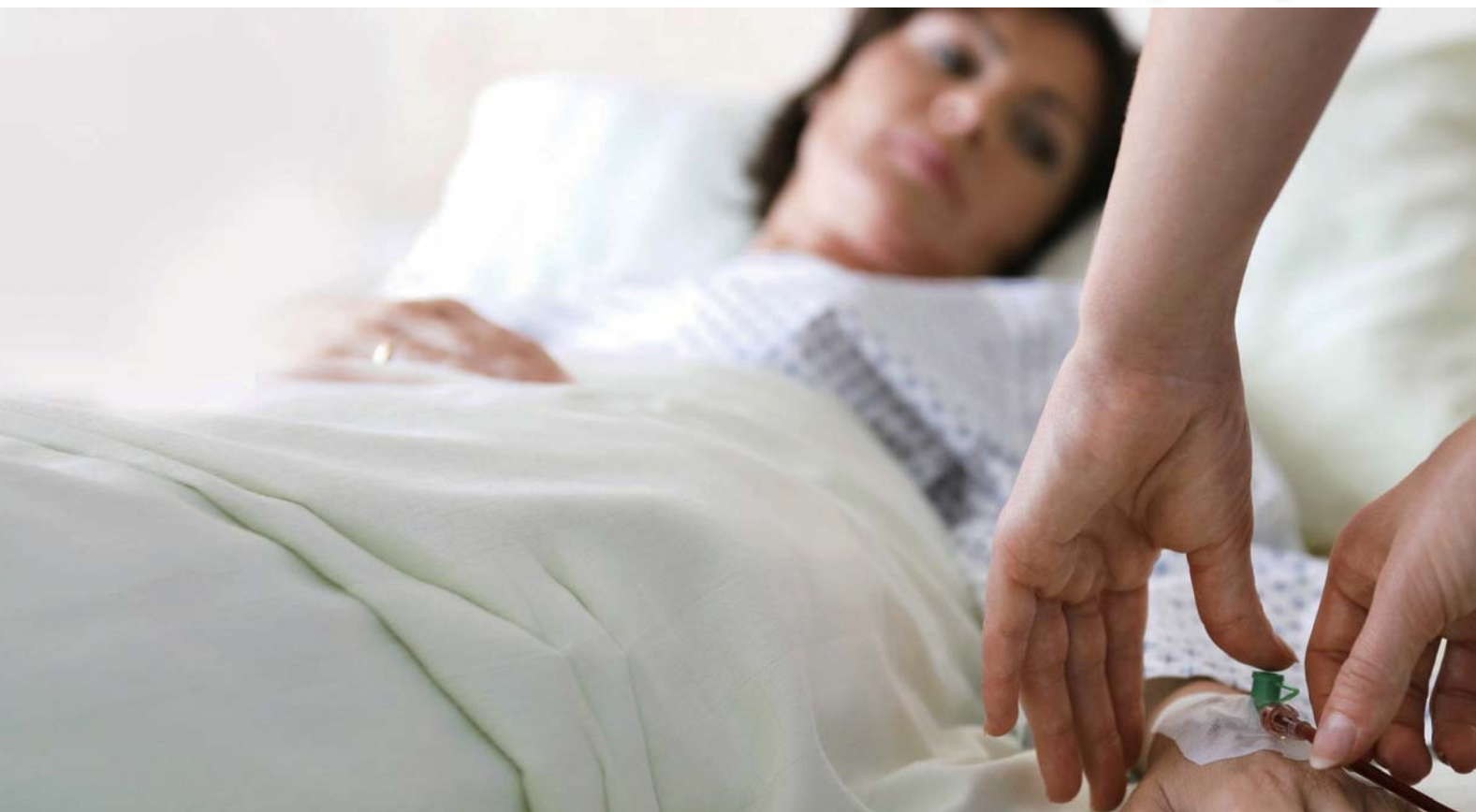

Fluido® Compact

Blood and Fluid Warming

Fluido®コンパクト 輸液輸血加温システム

偶発性低体温の寄与因子のひとつは、冷たい輸液の投与です。輸液および輸血を加温することにより、正常体温を維持し、良好な転帰を得やすくなります^{1,2}。

Fluido®コンパクトは、温水を用いないドライヒート式の加温装置
使い勝手が良く、安全かつ費用対効果の高い
輸液輸血加温システムです。

1 Evans J.W., Singer M., Coppinger S.W. et al., Cardiovascular performance and core temperature during transurethral prostatectomy. J. Urol 1994;152:2025-9
2 ECRI Report, Warming Units, Blood/Solution, December 2002



簡単


操作は電源ボタンのON/OFFのみ。Fluido®コンパクトは目標の温度まで輸液または血液製剤を迅速に加温
たった 4 mLのプライミングボリュームにより短時間でプライミングが完了

安全

本体内蔵のプログラムにより、独立した温度制御システムおよび 11個の温度センサーを介して正確で安全な輸液輸血を実現

費用対効果が高い

ドライヒート式の加温装置で水の定期交換が不要・メンテナンス不要のため作業コストを削減
消耗品のカートリッジは、シングルペイシエントユースで持ち運びやすく、例えば、ひとつのカートリッジを手術室での使用後に病棟にある Fluido®コンパクトに接続して使用することが可能

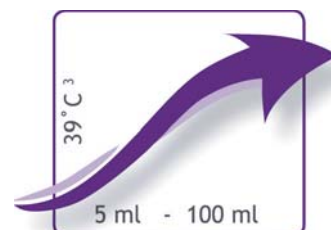

加温モジュール ●加温モジュール内の合計11個のセンサーで温度をコントロール




IPX4 (防沫形)

飛沫に対する保護
あらゆる角度からの散水を行い、
浸水 (悪影響) がない。

Fluido®コンパクトの加温性能-Tin 20°C

セットポイント：39°C ±2°C


最適流量：5~100 mL/分

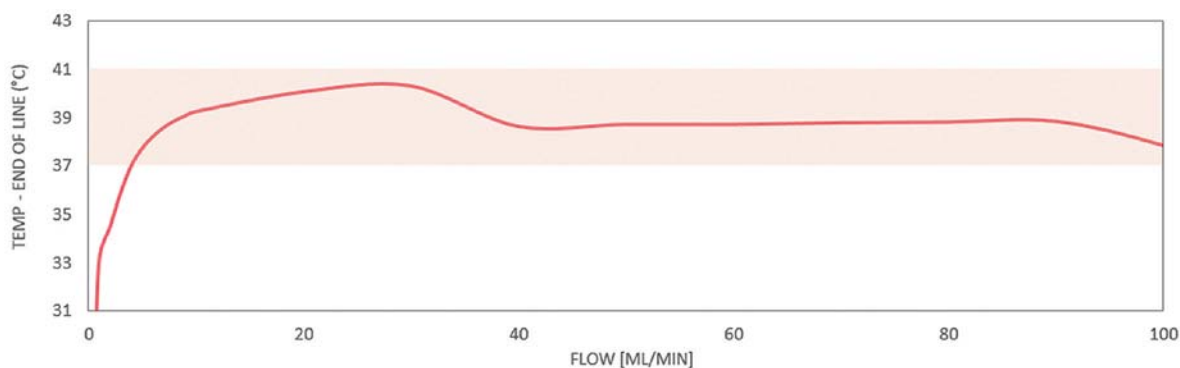

3 Validated tests with IV fluids at ambient temperature

カートリッジ

- プライミングボリューム **4mL**でプライミングは短時間
- 加温モジュールへのセットがワンタッチで簡単
- アルミプレートが一体で高い加温効率

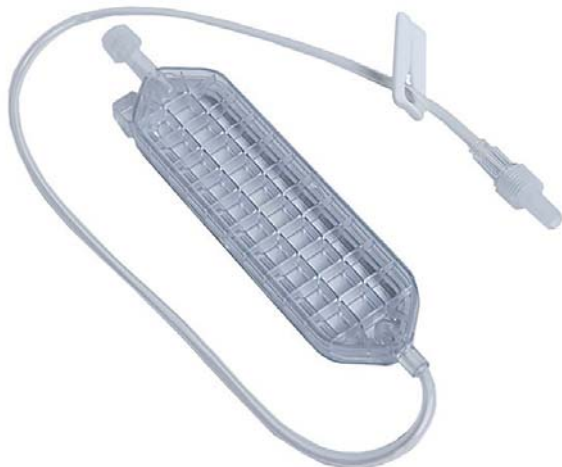

Fluido® Compact

Blood and Fluid Warming



フルイドコンパクト コントロールユニット (品番650100)

寸法と重量	285 x 120 x 195 mm, 1700 g
電圧	100 - 240 V ~ (50/60 Hz)
最大電力	160 W
防水規格	IPX1
インジケータ	温度超過インジケータ/修理インジケータ
電撃に対する保護クラス	クラス II
電撃に対する保護の程度	BF形 装着部

JMDNコード10447000 / 医療機器認証番号229ADBZX00026000



フルイドコンパクト 加温モジュール (品番650200)

寸法と重量	165 x 75 x 50 mm, 450 g
温度範囲	39°C ± 2°C
防水規格	IPX4
電撃に対する保護クラス	クラス II
電撃に対する保護の程度	BF形 装着部

JMDNコード10447000 / 医療機器認証番号229ADBZX00026000



フルイドコンパクト カートリッジ (品番672000)

プライミング量	4 mL
患者側チューブ	40 cm
最大流量	400 mL/min※
最大圧	300 mmHg
包装単位	10 個/箱

カートリッジは DEHPフリー・ラテックスフリー



JMDNコード70368000 / 医療機器認証番号229ADBZX00027000

※ Free flow with 300 mmHg



付属パーツ

電源コード (品番 FC-PC-JP)	4 m
---------------------	-----

法第二条第四項適用外

販売元

IMJ 株式会社 インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店: TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店: TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店: TEL092-451-2459・FAX092-451-2419

仙台営業所: TEL022-719-7666・FAX022-719-7654

名古屋営業所: TEL052-741-7124・FAX052-741-7125

製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL06-6222-3751(代)・FAX06-6222-3750

代理店